

材料別 使用用途一覧

博多ステラ歯科・矯正歯科クリニック 院内マニュアル | 操作手順は『治療別 接着プロトコル集』へ

20

残す材料（発注する）

3

なくす材料（在庫消化後は発注しない）

1

役割ごとに使う材料は原則1つ


10

使ってはいけない組み合わせ

☑ 残す材料（写真は院内の実物）



Quick 2

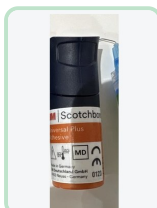

SBU Plus




FineEtch37



G-ボンド



アクティベーター

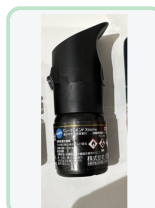

BB Xtreme




ライトレス II




カタナクリーナー



CPP

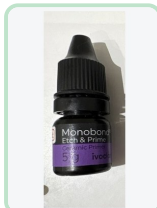


Monobond E&P

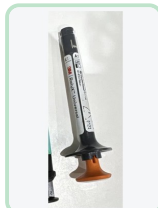

RelyX Universal



SA Multi

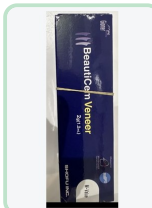

BeautiCem Veneer

everX Flow

TheraCal LC

FR ポスト

エステコア

オキシガード II

スーパーボンド

アイコン

↑ 写真未登録の材料

⊗ なくす材料 → 置き換え先



メガボンド 2

ダイレクト → **Quick 2 / SBU Plus**



ビューティリンク SA

日常セメント → **SA ルーティング Multi**



RelyX Luting Plus

合着 → **CPP + SA Multi**

□ この資料の使い方

① マトリクスで探す

2章：どの治療でどの材料を使うかを一覧

② 材料カードで確認

写真・役割・使い方・注意を1枚に

③ NG と保管を確認

6章：禁止の組み合わせ 7章：保管ルール

1 役割ごとの統一方針

役割ごとに使う材料を1つに絞る

役割	残す（発注する）	なくす
ボンディング材	Quick 2（保険）／SBU Plus（自費）	メガボンド 2
支台築造	ライトレス II + everX Flow／FR ポスト + エステコア（フェルールなし）	—
エッチング	FineEtch37	—
表面硬化（酸素阻害層）	オキシガード II（脱離が心配な症例のみ）	—
ホワイトスポット	G-ボンド ユニバーサル・アイコン	—
CR・セラミックのリペア	ポーセレンボンド アクティベーター（Quick 2 と混和）	—
補綴物の洗浄	カタナクリーナー	—
ジルコニア・メタル内面	セラミック プライマー プラス	—
e.max 内面	Monobond Etch & Prime	—
日常のセメント（CAD/CAM・メタル）	SA ルーティング Multi	ビューティリンク SA／RelyX Luting Plus
ジルコニア・e.max の装着	SBU Plus + RelyX Universal	—
ベニア専用	BeautiCem Veneer + ビューティボンド Xtreme	—
特殊症例の切り札	スーパーボンド	—

※ SBU Plus＝Scotchbond Universal Plus CPP＝セラミック プライマー プラス SA Multi＝SA ルーティング Multi

2 治療 × 材料マトリクス

どの治療でどの材料を使うかがひと目でわかる

● 主に使う ○ 条件つき・第二選択

材料	CR 充填					支台築造	補綴装着					特殊症例
	標準	大窩洞	覆髄	白濁	リペア	コア	ジルコニア	e.max	ベニア	CAD/CAM	メタル	特殊
Quick 2	●	●	●		●							
Scotchbond Universal Plus	○						●	●				
FineEtch37	●				●			●	●			
everX Flow		●				●						
TheraCal LC / ダイカル / ミエール			●									
G-ボンド ユニバーサル / アイコン				●								
ポーセレンボンド アクティベーター					●							●
ボンドマー ライトレス II						●						
FR ポスト + エステコア						○						
カタナクリーナー							●					
Monobond Etch & Prime								●	●			
RelyX Universal							●	●		○		
ビューティボンド Xtreme									●			
BeautiCem Veneer									●			
セラミックプライマー プラス										●	●	
SA ルーティング Multi										●	●	
オキシガード II									●			○
スーパーボンド												●
メガボンド 2 なくす	○											
ビューティリンク SA なくす										○	○	
RelyX Luting Plus なくす											○	

※ 条件つき：SBU Plus（CRの第二選択・IDS）、FR ポスト（フェルールなしのみ）、RelyX Universal（CAD/CAM 冠で脱離既往・保持形態が弱い症例）、オキシガード II（脱離が心配な症例）。

3 CR 充填・歯面処理の材料

主力は Quick 2。エナメル質には FineEtch37



ユニバーサルボンド Quick 2

主力（全症例）

◇ 擦り込み ◇ 強エア 5 秒 ◇ LED 10 秒

待ち時間なし。エナメル質が多い症例は FineEtch37 を併用



Scotchbond Universal Plus

第二選択・IDS

◇ 20 秒擦り込み ◇ エア 5 秒 ◇ LED 10 秒

RelyX Universal と純正ペア。補綴の前処理と共用できる



FineEtch37

選択エッチング

◇ エナメル質 15 秒 ◇ 水洗 20 秒

△ 象牙質に長く置かない



G-ボンド ユニバーサル

ホワイトスポット

◇ 平皿に採取 ◇ 白濁部に浸潤 ◇ LED 5 秒

エア不要。深皿は使わない（操作時間 約 7 分）

△ 止血剤を使うと接着力が戻らない



ポーセレンボンド アクティベーター

CR・セラミックのリペア

◇ Quick 2 と 1:1 ◇ 5 秒 / 20 秒 ◇ 5 秒以上

◇ LED 10 秒

シラン処理剤。混ぜるとすぐ使える

△ 作り置きしない



ビューティボンド Xtreme

ベニア装着時（必須）

◇ 塗布 ◇ 弱 3 秒→強 ◇ LED 5 秒

BeautiCem Veneer の添付文書で指定。CR 充填にも使える



everX Flow

大窩洞の裏層・コア

◇ 窩洞底から 2mm ◇ LED 20 秒 ◇

◇ 表層は CR

短繊維強化フロアブル

△ 最表層に出さない



TheraCal LC

覆髄（保険）

◇ 1mm 以下 ◇ LED 20 秒 / 層

ダイカル（保険・照射なし）、ミエール（自費・MTA）も覆髄に使用

△ 厚く塗ると硬化不良。範囲は最小限に



メガボンド 2

ダイレクト

在庫消化後は発注しない

◇ プライマー 20 秒 ◇ エア ◇ ボンド ◇

◇ LED 10 秒

象牙質接着の長期成績が最も高い

4 支台築造の材料

ライトレス II は光照射不要



ボンドマー ライトレス II

主力（全症例の前処理）

🌀 A 黄 + B 青 → 緑 > 🖌️ 塗布 >

🕒 30 秒以内にエア

光照射不要。操作時間：ブルーラバー皿 3 分 / ディスポ 1 分

⚠️ 塗布後にポストを試適しない。処理済みのポストと補綴物を触れさせない



everX Flow

主力（コア築造）

⚠️ 根管口から 2～3mm > 💡 LED 20 秒 >

📏 4mm 以下で積層

硬化深度 5.5mm（バルクシェード）

⚠️ 光重合のみ。根管の奥に入れない



トクヤマ FR ポスト + エステコア

フェールがない症例のみ

🖌️ ライトレス II で前処理 > 📏 挿入 >

💡 LED 10 秒以上

当院在庫のポストは 1.4mm。エステコアは冷蔵（使用 20 分前に室温へ）



混和皿

ライトレス II の混和

ブルーラバー：操作 3 分・アルコール清掃で再使用
ディスポ：操作 1 分・使い捨て

⚠️ ブルーラバーはオートクレーブ不可

👑 5 補綴のセット 材料の流れ

写真の順に使う。セメントとプライマーの組み合わせを固定


ジルコニア



e.max



e.max ベニア

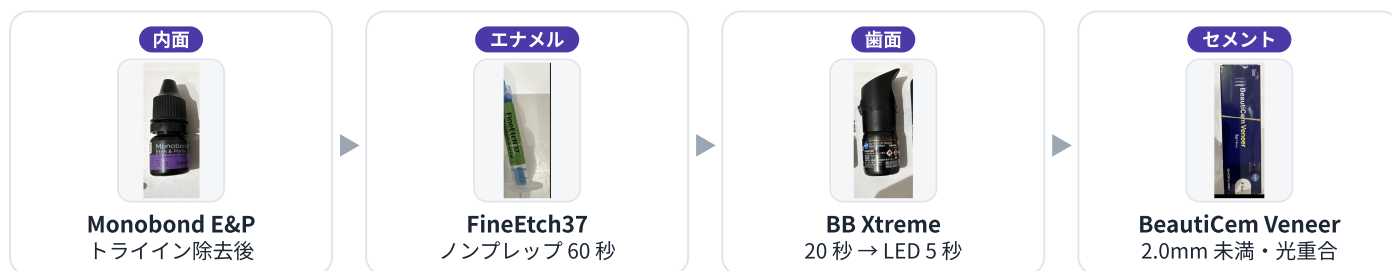

CAD/CAM 冠



メタル



⚠ CAD/CAM 冠に **RelyX Luting Plus** は使えない (接着性レジンセメントが診療指針で必須)。

⚠ CAD/CAM 冠で脱離既往・保持形態が弱い症例は **RelyX Universal** (支台歯は SBU Plus)。

5-2 補綴の材料カード




カタナクリーナー

試適後の唾液汚染除去

◇ 内面 10 秒 ◇ 水洗 ◇ 乾燥

⚠ リン酸は使わない (MDP の結合を阻害)

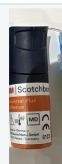

Scotchbond Universal Plus

内面処理・支台歯前処理

◇ 内面：塗布→エア 5 秒 ◇ 歯面：20 秒

MDP・シラン入り。RelyX Universal 併用時は照射不要



RelyX Universal

ジルコニア・e.max の装着

◇ 装着 ◇ 仮 2〜3 秒 ◇ 余剰除去 ◇

◇ 本 20 秒

デュアルキュア。光が届きにくい部位でも硬化



Monobond Etch & Prime

e.max 内面 (エッチング+シラン)

◇ 20 秒すり込み ◇ 40 秒 ◇ 水洗・乾燥

フッ化水素酸が不要

⚠ ジルコニアには使えない



BeautiCem Veneer

ベニア (厚さ 2.0mm 未満)

◇ 仮 2〜3 秒 ◇ 余剰除去 ◇ 本 10 秒

光重合専用

⚠ 光を通す修復物のみ (ジルコニア ×)。ユージノール系と併用不可



セラミックプライマー プラス

CAD/CAM・メタル内面のシラン処理

◇ ブラスト ◇ 塗布 ◇ 十分にエア

冷蔵 2〜8°C。使用直前に室温へ

⚠ 必須工程。SA セメント単独では付かない



SA ルーティング Multi

日常のセメント (CAD/CAM・メタル)

◇ 装着 ◇ 仮 2〜3 秒 ◇ 余剰除去 ◇

◇ 本 20 秒以上

保険で使用可。セルフアドヒーシブ (歯面の前処理不要)



ビューティリンク SA

CAD/CAM・金属冠・ジルコニア

在庫消化後は発注しない

◇ ブラスト ◇ プライマー ◇ 装着

なくなり次第 SA ルーティング Multi へ



RelyX Luting Plus

合着 (保持形態が十分な金属冠)

在庫消化後は発注しない

◇ 練和 ◇ 装着 ◇ LED 5 秒

接着ではなく合着

⚠ CAD/CAM 冠・e.max・ベニアには使えない

⊗ 6 使ってはいけない組み合わせ

理由と、代わりに使う材料をセットで覚える

ジルコニア ⊗ BeautiCem Veneer

光重合専用。添付文書は「光を通す修復物のみ」

→ 代わりに：RelyX Universal

BeautiCem Veneer ⊗ ユージノール系材料

硬化・接着を阻害する（添付文書）

→ 代わりに：ユージノールを含まない材料

ジルコニア ⊗ Monobond Etch & Prime

ガラス相がなくエッチングが効かない

→ 代わりに：SBU Plus

ジルコニア ⊗ フッ化水素酸

表面が変わらず無効

→ 代わりに：プラスト + SBU Plus

ジルコニアの洗浄 ⊗ リン酸（FineEtch37）

リン酸が吸着し MDP の結合を阻害

→ 代わりに：カタナクリーナー

e.max ⊗ SA セメント単独

シラン処理がなく接着が大きく落ちる。薄いものは破折リスク

→ 代わりに：Monobond E&P + RelyX Universal

e.max ⊗ RelyX Luting Plus

合着では e.max の強度を保てない

→ 代わりに：RelyX Universal

CAD/CAM 冠 ⊗ RelyX Luting Plus

接着性レジンセメントが診療指針で必須

→ 代わりに：SA ルーティング Multi

CAD/CAM 冠 ⊗ シラン処理の省略

必須工程。省くと脱離の主因

→ 代わりに：セラミック プライマー プラス

メーカー A のボンド ⊗ メーカー B のセメント

添付文書外。脱離・破折時の説明で不利

→ 代わりに：純正の組み合わせ

🔑 7 保管・取扱いのルール

冷蔵品は使う前に室温へ。結露は接着力低下のもと

📁 冷蔵庫

セラミック プライマー プラス 2～8℃

エステコア 0～10℃

オキシガード II 冷蔵

スーパーボンド 冷蔵

ポーセレンボンド アクティベータ 冷蔵

—

※ 使用直前に室温へ戻す

🔥 常温

ビューティセム ベニア 1～30℃・暗所

RelyX Universal 常温

G-ボンド ユニバーサル 常温

TheraCal LC 20～25℃

✅ どちらでも可

カタナクリーナー

Scotchbond Universal Plus

SA ルーティング Multi

Quick 2

everX Flow

Monobond Etch & Prime

ボンドマー ライトレス II

7-2 毎日の取扱いルール



5 分以内

ボトルから出したら使い切る（溶媒が揮発して濃度が変わる）



出しっぱなし禁止

チェアサイドに置きっぱなしにしない。エステコアは使用後すぐ冷蔵庫へ



月 1 回

在庫チェックで全材料の使用期限を確認。期限切れはすぐ下げる

⚠️ 冷えたまま使うと **結露** し、接着力と流動性が落ちる。**朝の準備で室温に出す** 運用をスタッフで共有する。

※ 写真は院内の実物。材料を入れ替えたときは写真と表を更新する。温度の詳細グラフは『接着プロトコル集』5 章。