


材料別 使用用途一覧

博多ステラ歯科・矯正歯科クリニック 院内マニュアル | 操作手順の詳細は『治療別 接着プロトコル集』を参照

この資料の使い方

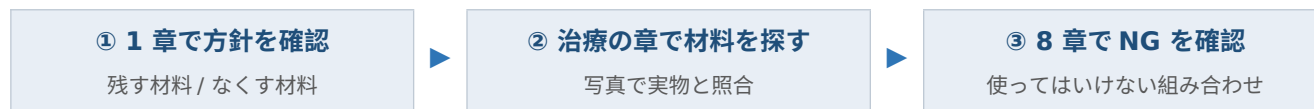

1 材料の統一方針

役割ごとに使う材料を 1 つに絞る。右列の材料は在庫がなくなり次第、発注しない。

役割	残す（発注する）	なくす（在庫消化後は発注しない）
ボンディング材	ユニバーサルボンド Quick 2（保険） Scotchbond Universal Plus（自費）	メガボンド 2（ダイレクト）
支台築造	ボンドマー ライトレス II + everX Flow トクヤマ FR ポスト + エステコア（フェルールなし）	—
エッチング	FineEtch37	—
表面硬化（酸素阻害層）	オキシガード II（脱離が心配な症例のみ）	—
ホワイトスポット	G-ボンド ユニバーサル・アイコン	—
CR・セラミックのリペア	ポーセレンボンド アクティベーター（Quick 2と混和）	—
補綴物の洗浄	カタナクリーナー	—
ジルコニア・メタル内面	セラミック プライマー プラス	—
e.max 内面	Monobond Etch & Prime	—
日常のセメント（CAD/CAM・メタル）	SA ルーティング Multi	ビューティリンク SA RelyX Luting Plus
ジルコニア・e.max の装着	Scotchbond Universal Plus + RelyX Universal	—
ベニア専用	BeautiCem Veneer + ビューティボンド Xtreme	—
特殊症例の切り札	スーパーボンド	—

2 CR 充填

写真	材料 / 用途	使い方	注意
	ユニバーサルボンド Quick 2 主力（全症例）	擦り込み → 強圧エア 5 秒 → LED 10 秒	待ち時間なし エナメル質が多い症例は FineEtch37 を併用
	Scotchbond Universal Plus 第二選択・IDS	20 秒擦り込み → エア 5 秒 → LED 10 秒	RelyX Universal と純正ペア 補綴の前処理と共用できる
	FineEtch37 選択エッチング	エナメル質のみ 15 秒 → 水洗 20 秒	象牙質に長く置かない
	メガボンド 2 ダイレクト（在庫消化後は発注しない）	プライマー 20 秒 → エア → ボンド → 弱エア → LED 10 秒	象牙質接着の長期成績が最も高い。深いう蝕など質を優先する症例に
写真なし	everX Flow 大窩洞・咬合圧が高い症例の裏層	窩洞底から 2mm 程度 → 照射 → 表層は通常 CR	最表層に出さない 短繊維強化フロアブル
写真なし	TheraCal LC 露髄・髄床底に近い症例の覆髄	1mm 以下で塗布 → LED 20 秒	厚く塗ると硬化不良。範囲は最小限に
	G-ボンド ユニバーサル ホワイトスポットの白濁改善	平皿に採取 → 白濁部に浸潤 → LED 5 秒	エアブロー不要。深皿は使わない（操作時間 7 分） 止血剤を使うと接着力が戻らない
	ビューティボンド Xtreme ベニア装着時（必須）	塗布 → 弱エア 3 秒 → 強エア → LED 5 秒	BeautiCem Veneer の添付文書で指定 CR 充填にも使える
	ポーセレンボンド アクティベーター 既存 CR・セラミックのリペア	Quick 2 と 1 滴ずつ混和 → 塗布 → エア 5 秒以上 → LED 10 秒 塗布時間: CR のみ 5 秒 / 歯質を含む 20 秒	作り置きしない 混ぜるとすぐ使える（待ち時間なし）

3 支台築造（コア）

写真	材料 / 用途	使い方	注意
	ボンドマー ライトレス II 主力（全症例の前処理）	A 液（黄）・B 液（青）各 1 滴 → 緑色を確認 → 塗布 → 30 秒以内にエア照射は不要	塗布後にポストを試適しない 処理済みのポストと補綴物を触れさせない
写真なし	everX Flow 主力（コア築造）	根管口から 2～3mm → 照射 → 歯冠部は 4mm 以下ずつ積層	光重合のみ。根管の奥に入れない 硬化深度 5.5mm（バルクシェード）
写真なし	トクヤマ FR ポスト フェルールが確保できない症例のみ	試適 → ライトレス II で前処理 → 乾燥 → 挿入後 10 秒以上照射	当院在庫は 1.4mm
写真なし	混和皿 ライトレス II の混和	操作可能時間 ブルーラバー：3 分 ／ ディスポ：1 分	ブルーラバーはアルコール清掃で再使用。オートクレーブ不可

4 ジルコニア補綴のセット

流れ：ブラスト → カタナクリーナー → Scotchbond Universal Plus → RelyX Universal

写真	材料 / 用途	使い方	注意
写真なし	サンドブラスト 内面の粗造化	アルミナ 50μm / 0.1MPa / 10mm / 10 秒 高透光性（4Y・5Y）は 0.05～0.1MPa	内面の光沢が消えるまで
	カタナクリーナー 試適後の唾液汚染除去	内面に 10 秒 → 水洗 → 乾燥	リン酸は使わない（MDP の結合を阻害する）
	Scotchbond Universal Plus 内面処理・支台歯前処理	内面：塗布 → エア 5 秒 支台歯：20 秒擦り込み → エア 5 秒	MDP・シラン入りでジルコニアに直接使える RelyX Universal 併用時は照射不要
	RelyX Universal ジルコニアの装着	内面に塗布 → 装着 → タックキュア → 余剰除去 → 本重合	ジルコニアはこの組み合わせに統一

5 e.max・ガラスセラミック補綴のセット

写真	材料 / 用途	使い方	注意
	Monobond Etch & Prime 内面処理（エッチング＋シラン）	20 秒すり込む → 40 秒置く → 水洗 → 乾燥	フッ化水素酸が不要 ジルコニアには使えない

写真	材料 / 用途	使い方	注意
	BeautiCem Veneer ベニア（厚さ 2.0mm 未満）	光重合専用 2～3 秒照射で半硬化 → 余剰除去 → 本重 合 LED 10 秒	光を通す修復物のみ（ジルコニア ×） ユージノール系と併用不可
	RelyX Universal クラウン・インレー・アンレ ー	デュアルキュア 支台歯は Scotchbond Universal Plus	光が届きにくい部位でも確実に硬 化

6 CAD/CAM 冠のセット（保険）

流れ：ブラスト（弱圧）→セラミック プライマー プラス→SA ルーティング Multi

写真	材料 / 用途	使い方	注意
写真なし	サンドブラスト 内面の粗造化	アルミナ 50 μ m / 弱圧 0.1～0.2MPa	ブラストできない時はリン酸で確実に清掃
	セラミック プライマー プラス 内面のシラン処理	ブラスト・乾燥後に塗布 → エア	必須工程。SA セメント単独では付かない
	SA ルーティング Multi CAD/CAM 冠の装着	内面処理後に装着 → タックキュア → 余剰除去	保険で使える。接着性レジンセメントは診療指針で必須
	RelyX Universal 脱離既往・保持形態が弱い症例	デュアルキュア 支台歯は Scotchbond Universal Plus	エンドクラウンはデュアルキュア型が推奨

注意 CAD/CAM 冠に **RelyX Luting Plus** は使えない。

7 メタル補綴のセット

写真	材料 / 用途	使い方	注意
	セラミック プライマー プラス + SA ルーティング Multi 保険 FMC・ブリッジ・インレー	ブラスト（0.3～0.5MPa）→ プライマー → 装着	統一後の標準手順。接着で脱離を減らす
	RelyX Luting Plus 在庫消化まで	練和 → 装着	接着ではなく合着。なくなり次第、上の手順へ統一
	ビューティリンク SA 在庫消化まで	ブラスト → プライマー → 装着	なくなり次第、SA ルーティング Multi へ統一

8 使ってはいけない組み合わせ

	組み合わせ	理由	代わりに
×	ジルコニア × BeautiCem Veneer	光重合専用。添付文書は「光を通す修復物のみ」	RelyX Universal
×	BeautiCem Veneer × ユージノール系材料	硬化・接着を阻害（添付文書）	ユージノールを含まない仮着材
×	ジルコニア × Monobond Etch & Prime	ガラス相がなくエッチングが効かない	Scotchbond Universal Plus
×	ジルコニア × フッ化水素酸	同上。表面が変わらず無効	ブラスト + Scotchbond Universal Plus
×	ジルコニアの洗浄 × リン酸 (FineEtch37)	リン酸が吸着し MDP の結合を阻害	カタナクリーナー
×	e.max × SA セメント単独	シラン処理がなく接着が大きく落ちる。薄いものは破折リスク	Monobond E&P + RelyX Universal
×	e.max × RelyX Luting Plus	合着では e.max の強度を保てない	RelyX Universal
×	CAD/CAM 冠 × RelyX Luting Plus	接着性レジンセメントが診療指針で必須	SA ルーティング Multi
×	CAD/CAM 冠 × シラン処理なし	必須工程。省くと脱離の主因	セラミックプライマー プラス
×	メーカーを跨いだボンド+セメント	添付文書外。脱離・破折時の説明で不利	純正の組み合わせ

9 保管・取扱いの共通ルール

項目	内容
冷蔵	セラミックプライマー プラス (2~8℃) / エステコア (0~10℃) / オキシガード II / スーパーボンド / ポーセレンボンド アクティベーター 使用直前に室温へ戻す（結露すると接着力が落ちる）
室温・暗所	ビューティセム ベニア (1~30℃、添付文書)
常温	RelyX Universal / G-ボンド ユニバーサル / TheraCal LC
冷蔵・常温どちらも可	カタナクリーナー / Scotchbond Universal Plus / SA ルーティング Multi / Quick 2 / everX Flow / Monobond Etch & Prime / ボンドマー ライトレス II
ボトルから出したら	溶媒が揮発して濃度が変わるため 5 分以内 に使い切る
チェアサイド	出しっぱなしにしない。エステコアは使用後すぐ冷蔵庫へ
使用期限	月 1 回の在庫チェックで全材料を確認。期限切れはすぐチェアサイドから下げる

※ 写真は院内の実物です。材料を入れ替えたときは写真と表を更新してください。